

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://unispectr.nt-rt.ru/> || urc@nt-rt.ru


Центрифуги PowerSpin™ DX

Технические характеристики

PowerSpin™ DX Centrifuge

PowerSpin™ DX Centrifuge With 3 rotor options this centrifuge is a great answer for every day laboratory tasks.

- 24 place fixed rotor for 2-15ml tubes (#C8724)
 - 6 place horizontal rotor for 2-15ml tubes (#C8706)
 - 4 place horizontal rotor for up to 50ml tubes (#C8704)
- The PowerSpin™ DX has variable speed 500 – 4000 RPM, to insure a clean and complete separation. Quiet and dependable, with a maintenance free motor, it can be used to process blood, urine, fecal and other specimens.

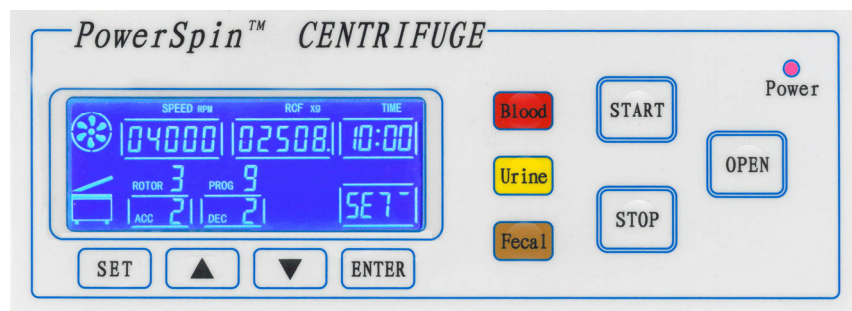

Model #C8724

The all digital front panel with 3 pre-programmed options makes it easy to select most commonly run settings. The oversized display shows status, time, speed (RPM) and RCF (g). Precise speed control enables you to comply with CLIA recommendations for specific specimens.

- Zero RPM Safety Latching System prevents lid from being opened while rotor is spinning
- Quiet running, only 50 decibels at 3400 RPM
- 99 minute digital timer, 1 sec. increment
- 500-4000 RPM, 100 RPM increment

- 3 pre-programmed options for blood, fecal and urine
- Remembers last setting for quick repeat runs
- Adjustable Acceleration and Deceleration
- Stainless steel rotor chamber for easy cleaning
- Available in **110V** and **220V** - Contact for details



Professional Digital Non-Contact Photo-Tachometer

- Highly accurate, scientific tool
- Easy to operate
- Standard adhesive reflective tape (included)
- Aim and measure--RPMs instantly display on large LCD screen.
- Includes custom protective cushioned storage case
- Order pn# C800-75



Model C8724

- 24 place fixed angle rotor (pn#C8600-03 — rotor only)
- Designed to accept 10ml blood tubes and up to 15ml urine tubes
- 2ml tubes with small tube adaptor (pn# C800-04 — set of 2)
- 5ml tubes with short tube adaptor (pn# C800-03 — set of 10)



Model C8706

- 6 place horizontal rotor (pn#C8600-01 — rotor only)
- Specifically designed to keep tubes vertical at rest
- Designed to accept 10ml blood tubes and up to 15ml urine tubes
- 2ml tubes with small tube adaptor (pn# C800-04 — set of 2)
- 5ml tubes with short tube adaptor (pn# C800-03 — set of 10)



Model C8704

- 4 place horizontal rotor (pn#C8600-02 — rotor only)
- Designed to accept 50ml tubes
- With adaptors can accept most of the tubes used in laboratory
- 6 to 15ml tubes with adaptor (pn# C8604-02 — set of 2)
- 3 to 5ml tubes with adaptor (pn# C8604-03 — set of 2)
- 0.5 to 2ml tubes with adaptor (pn# C8604-04 — set of 2)

Model	Item	Speed	Max. RCF	Rotor	Tube Size	Tube Holdster 24 place
PowerSpin™ DX	C8724	500 – 4000 RPM	2508	24 place fixed	2-15ml	Optional
PowerSpin™ DX	C8724H	500 – 4000 RPM	2508	24 place fixed	2-15ml	Included
PowerSpin™ DX	C8706	500 – 4000 RPM	2508	6 place horizontal	2-15ml	Optional
PowerSpin™ DX	C8706H	500 – 4000 RPM	2508	6 place horizontal	2-15ml	Included
PowerSpin™ DX	C8704	500 – 4000 RPM	2508	4 place horizontal	50 ml	Optional
PowerSpin™ DX	C8704H	500 – 4000 RPM	2508	4 place horizontal	50 ml	Included

Центрифуга PowerSpin DX C8764H

Обладая скоростью до 5500 об / мин и горизонтальным вращающимся ротором, эта центрифуга является отличным инструментом для загруженной лаборатории. Имеет диапазон регулируемой скорости от 500 до 5 500 об / мин, чтобы обеспечить чистое и полное разделение. Бесшумный и надежный, с необслуживаемым двигателем, кожухами для трубок из нержавеющей стали, он может использоваться для обработки крови, мочи, фекалий и других образцов.

Полностью цифровая передняя панель с 3 предварительно запрограммированными параметрами

3 минуты при 4000 G (для пробирки BD Barricor™)

1800 об / мин в течение 5 минут для мочи

10 минут при 2000 G

Пользовательские настройки просты и интуитивно понятны благодаря цифровой панели и большому дисплею.

4000 г в течение 3 минут идеально подходит для пробирок Barricor™. Пробирки для забора крови BD Vacutainer® Barricor™ Plasma представляют собой одноразовые пластиковые вакуумные пробирки с литиевым гепарином и механическим сепаратором.

- ☐ ЦЕНТРИФУГА POWERSPIN™ DXB
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 500-5500 ОБ / МИН
- ☐ 3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЦИИ ДЛЯ BD BARRICOR™ И ДРУГИХ ТРУБ
- ☐ 4-МЕСТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР ДЛЯ ТРУБ НА 50 МЛ
- ☐ ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР 60 МИН
- ☐ ВМЕСТИМОСТЬ ТРУБЫ 4X50 МЛ
- ☐ СТОЙКА ДЛЯ ТРУБКИ HOLDSTER™ НА 24 МЕСТА
- ☐ ВХОД ПИТАНИЯ 110 В

Центрифуга PowerSpin DX C8764

Обладая скоростью до 5500 об / мин и горизонтальным вращающимся ротором, эта центрифуга является отличным инструментом для загруженной лаборатории. Имеет диапазон регулируемой скорости от 500 до 5 500 об / мин, чтобы обеспечить чистое и полное разделение. Бесшумный и надежный, с необслуживаемым двигателем, кожухами для трубок из нержавеющей стали, он может использоваться для обработки крови, мочи, фекалий и других образцов. Полностью цифровая передняя панель с 3 предварительно запрограммированными параметрами
3 минуты при 4000 G (для пробирки BD Barricor™)
1800 об / мин в течение 5 минут для мочи
10 минут при 2000 G

Пользовательские настройки просты и интуитивно понятны благодаря цифровой панели и большому дисплею.

4000 г в течение 3 минут идеально подходит для пробирок Barricor™. Пробирки для забора крови BD Vacutainer® Barricor™ Plasma представляют собой одноразовые пластиковые вакуумные пробирки с литиевым гепарином и механическим сепаратором.



- ☐ ЦЕНТРИФУГА POWERSPIN™ DXB
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 500-5500 ОБ / МИН
- ☐ 3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЦИИ ДЛЯ BD BARRICOR™ И ДРУГИХ ТРУБ
- ☐ 4-МЕСТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР ДЛЯ ТРУБ НА 50 МЛ
- ☐ ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР 60 МИН
- ☐ ВМЕСТИМОСТЬ ТРУБЫ 4X50 МЛ
- ☐ ВХОД ПИТАНИЯ 110 В

Центрифуга PowerSpin DX C8763H

Обладая скоростью до 5500 об / мин и горизонтальным вращающимся ротором, эта центрифуга является отличным инструментом для загруженной лаборатории. Имеет диапазон регулируемой скорости от 500 до 5 500 об / мин, чтобы обеспечить чистое и полное разделение. Бесшумный и надежный, с необслуживаемым двигателем, кожухами для трубок из нержавеющей стали, он может использоваться для обработки крови, мочи, фекалий и других образцов.

Полностью цифровая передняя панель с 3 предварительно запрограммированными параметрами

3 минуты при 4000 G (для пробирки BD Barricor ™)

1800 об / мин в течение 5 минут для мочи

10 минут при 2000 G

Пользовательские настройки просты и интуитивно понятны благодаря цифровой панели и большому дисплею.

4000 г в течение 3 минут идеально подходит для пробирок Barricor ™. Пробирки для забора крови BD Vacutainer® Barricor ™ Plasma представляют собой одноразовые пластиковые вакуумные пробирки с литиевым гепарином и механическим сепаратором.

- ☐ ЦЕНТРИФУГА POWERSPIN ™ DXB
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 500-5500 ОБ / МИН
- ☐ 3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЦИИ ДЛЯ BD BARRICOR ™ И ДРУГИХ ТРУБ
- ☐ 6-МЕСТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР
- ☐ ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР 60 МИН
- ☐ ВМЕСТИМОСТЬ ТРУБЫ 6X15 МЛ
- ☐ СТОЙКА ДЛЯ ТРУБКИ HOLDSTER ™ НА 24 МЕСТА
- ☐ ВХОД ПИТАНИЯ 110 В

Размер	Высота 13,75 дюйма (высота 22 дюйма с открытой крышкой) x глубина 15 дюймов x ширина 11 дюймов
Размер доставки	19 "X18" X15 "
Масса	31 фунтов
Вес с упаковкой	36 фунтов

Центрифуга PowerSpin DX C8763

Обладая скоростью до 5500 об / мин и горизонтальным вращающимся ротором, эта центрифуга является отличным инструментом для загруженной лаборатории. Имеет диапазон регулируемой скорости от 500 до 5 500 об / мин, чтобы обеспечить чистое и полное разделение. Бесшумный и надежный, с необслуживаемым двигателем, кожухами для трубок из нержавеющей стали, он может использоваться для обработки крови, мочи, фекалий и других образцов.

Полностью цифровая передняя панель с 3 предварительно запрограммированными параметрами

3 минуты при 4000 G (для пробирки BD Barricor™)

1800 об / мин в течение 5 минут для мочи

10 минут при 2000 G

Пользовательские настройки просты и интуитивно понятны благодаря цифровой панели и большому дисплею.

4000 г в течение 3 минут идеально подходит для пробирок Barricor™. Пробирки для забора крови BD Vacutainer® Barricor™ Plasma представляют собой одноразовые пластиковые вакуумные пробирки с литиевым гепарином и механическим сепаратором.



- ☐ ЦЕНТРИФУГА POWERSPIN™ DXB
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 500-5500 ОБ / МИН
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 500-3500 ОБ / МИН
- ☐ 3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЦИИ ДЛЯ BD BARRICOR™ И ДРУГИХ ТРУБ
- ☐ 6-МЕСТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР
- ☐ ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР 60 МИН
- ☐ ВМЕСТИМОСТЬ ТРУБЫ 6X15 МЛ
- ☐ ВХОД ПИТАНИЯ 110 В

Размер	Высота 13,75 дюйма (высота 22 дюйма с открытой крышкой) x глубина 15 дюймов x ширина 11 дюймов
Размер доставки	19 "X18" X15 "
Масса	31 фунтов
Вес с упаковкой	36 фунтов

Центрифуга PowerSpin DX C8724HE

Эта центрифуга с 3 вариантами ротора является отличным решением для повседневных лабораторных задач. Выберите из 24-местный фиксированный ротор для пробирок 2-15 мл (# C8724), 6-местный горизонтальный ротор для пробирок 2-15 мл (# C8706) или 4-местный горизонтальный ротор для пробирок объемом до 50 мл (# C8704)

Серия PowerSpin DX отличается большим, просторным внутренним покрытием из нержавеющей стали, полностью цифровым кнопочным управлением с 3 предустановленными рабочими режимами для крови, мочи и фекалий, регулируемой скоростью 500-4000 об / мин и системой фиксации крышки с нулевым об / мин. DX доступны в трех основных версиях: роторы с фиксированным углом и горизонтальные вращающиеся роторы. Все модели DX оснащены необслуживаемыми бесщеточными двигателями и резиновыми ножками на присосках.

- ☐ ЦЕНТРИФУГА POWERSPIN™ DX
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 1000-3400 ОБ / МИН
- ☐ 24-МЕСТНЫЙ ФИКСИРОВАННЫЙ РОТОР ANGEL
- ☐ ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР 60 МИН
- ☐ ВМЕСТИМОСТЬ ТРУБКИ 24X10 МЛ ИЛИ ТРУБКИ 16X15 МЛ
- ☐ СТОЙКА ДЛЯ ТРУБКИ HOLDSTER™ НА 24 МЕСТА
- ☐ ВХОД ПИТАНИЯ 110 В

Размер	Высота 13,75 дюйма (высота 22 дюйма с открытой крышкой) x глубина 15 дюймов x ширина 11 дюймов
Размер доставки	19 "X18" X15 "
Масса	31 фунтов
Вес с упаковкой	36 фунтов

Центрифуга PowerSpin DX C8724E

Эта центрифуга с 3 вариантами ротора является отличным решением для повседневных лабораторных задач. Выберите из 24-местный фиксированный ротор для пробирок 2-15 мл (# C8724), 6-местный горизонтальный ротор для пробирок 2-15 мл (# C8706) или 4-местный горизонтальный ротор для пробирок объемом до 50 мл (# C8704)

Серия PowerSpin DX отличается большим, просторным внутренним покрытием из нержавеющей стали, полностью цифровым кнопочным управлением с 3 предустановленными рабочими режимами для крови, мочи и фекалий, регулируемой скоростью 500-4000 об / мин и системой фиксации крышки с нулевым об / мин. DX доступны в трех основных версиях: роторы с фиксированным углом и горизонтальные вращающиеся роторы. Все модели DX оснащены необслуживаемыми бесщеточными двигателями и резиновыми ножками на присосках.

- ☐ ЦЕНТРИФУГА POWERSPIN™ DX
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 1000-3400 ОБ / МИН
- ☐ 24 МЕСТА ФИКСИРОВАННОГО УГЛОВОГО РОТОРА
- ☐ ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР 60 МИН
- ☐ ВМЕСТИМОСТЬ ТРУБКИ 24X10 МЛ ИЛИ ТРУБКИ 16X15 МЛ
- ☐ ВХОД ПИТАНИЯ 220В

Размер	Высота 13,75 дюйма (высота 22 дюйма с открытой крышкой) x глубина 15 дюймов x ширина 11 дюймов
Размер доставки	19 "X18" X15 "
Масса	31 фунтов
Вес с упаковкой	36 фунтов

Центрифуга PowerSpin DX C8706HE



Эта центрифуга с 3 вариантами ротора является отличным решением для повседневных лабораторных задач. Выберите из 24-местный фиксированный ротор для пробирок 2-15 мл (# C8724), 6-местный горизонтальный ротор для пробирок 2-15 мл (# C8706) или 4-местный горизонтальный ротор для пробирок объемом до 50 мл (# C8704). Серия PowerSpin DX отличается большим, просторным внутренним покрытием из нержавеющей стали, полностью цифровым кнопочным управлением с 3 предустановленными рабочими режимами для крови, мочи и фекалий, регулируемой скоростью 500-4000 об / мин и системой фиксации крышки с нулевым об / мин. DX доступны в трех основных версиях: роторы с фиксированным углом и горизонтальные

вращающиеся роторы. Все модели DX оснащены необслуживаемыми бесщеточными двигателями и резиновыми ножками на присосках

- ☐ ЦЕНТРИФУГА POWERSPIN™ DX
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 1000-3400 ОБ / МИН
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 500-3500 ОБ / МИН
- ☐ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ КРОВИ, МОЧИ И ФЕКАЛА
- ☐ 6-МЕСТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР
- ☐ ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР 60 МИН
- ☐ ВМЕСТИМОСТЬ ТРУБЫ 6X15 МЛ
- ☐ СТОЙКА ДЛЯ ТРУБКИ HOLDSTER™ НА 24 МЕСТА
- ☐ ВХОД ПИТАНИЯ 220В

Размер	Высота 13,75 дюйма (высота 22 дюйма с открытой крышкой) x глубина 15 дюймов x ширина 11 дюймов
Размер доставки	19 "X18" X15 "
Масса	31 фунтов
Вес с упаковкой	36 фунтов

Центрифуга PowerSpin DX C8706E

Эта центрифуга с 3 вариантами ротора является отличным решением для повседневных лабораторных задач. Выберите из 24-местный фиксированный ротор для пробирок 2-15 мл (# C8724), 6-местный горизонтальный ротор для пробирок 2-15 мл (# C8706) или 4-местный горизонтальный ротор для пробирок объемом до 50 мл (# C8704)

Серия PowerSpin DX отличается большим, просторным внутренним покрытием из нержавеющей стали, полностью цифровым кнопочным управлением с 3 предустановленными рабочими режимами для крови, мочи и фекалий, регулируемой скоростью 500-4000 об / мин и системой фиксации крышки с нулевым об / мин. DX доступны в трех основных версиях: роторы с фиксированным углом и горизонтальные вращающиеся роторы. Все модели DX оснащены необслуживаемыми бесщеточными двигателями и резиновыми ножками на присосках.



- ☐ ЦЕНТРИФУГА POWERSPIN™ DX
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 1000-3400 ОБ / МИН
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 500-3500 ОБ / МИН
- ☐ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ КРОВИ, МОЧИ И ФЕКАЛА
- ☐ 6-МЕСТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР
- ☐ ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР 60 МИН
- ☐ ВМЕСТИМОСТЬ ТРУБЫ 6X15 МЛ
- ☐ ВХОД ПИТАНИЯ 220В

Центрифуга PowerSpin DX C8704E

Эта центрифуга с 3 вариантами ротора является отличным решением для повседневных лабораторных задач. Выберите из 24-местный фиксированный ротор для пробирок 2-15 мл (# C8724), 6-местный горизонтальный ротор для пробирок 2-15 мл (# C8706) или 4-местный горизонтальный ротор для пробирок объемом до 50 мл (# C8704)

Серия PowerSpin DX отличается большим, просторным внутренним покрытием из нержавеющей стали, полностью цифровым кнопочным управлением с 3 предустановленными рабочими режимами для крови, мочи и фекалий, регулируемой скоростью 500-4000 об / мин и системой фиксации крышки с нулевым об / мин. DX доступны в трех основных версиях: роторы с фиксированным углом и горизонтальные вращающиеся роторы. Все модели DX оснащены необслуживаемыми бесщеточными двигателями и резиновыми ножками на присосках.



- ☐ ЦЕНТРИФУГА POWERSPIN™ DX
- ☐ ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ 1000-3400 ОБ / МИН
- ☐ 4-МЕСТНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР ДЛЯ ТРУБ НА 50 МЛ
- ☐ ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР 60 МИН
- ☐ ВМЕСТИМОСТЬ ТРУБЫ 4X50 МЛ
- ☐ ВХОД ПИТАНИЯ 220В

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93